

Aloitusopas

DiaExpert Glukoosisensori

PIENI SENSORI
SUURI TUKI



DiaExpert

Myynti yksinoikeudella



SENSORI, JOHON VOIT LUOTTAA



Kevyt ja huomaamaton
jokapäiväiseen käyttöön*



Vedenkestävä: voit käydä suihkussa,
kylvyssä tai uimassa**



Mittaus joka
minuutti



Luotettava
ja tarkka



Automaattiset mittaukset
ilman skannausta



Henkilökohtaisesti
säädetävät hälytykset



Kalibrointi mahdollista,
mutta ei välttämätöntä



Käyttöaika jopa
15 päivää



*Halkaisija 22 mm, korkeus 4,2 mm ja paino vain 2,2 grammaa.

**Vedenkestävä jopa 1 tunnin ajan ja 2 metrin syvyyteen asti.



Käytännöllinen: Sovellus näyttää
glukoosiarvosi värikoodattuna
Näet yhdellä vilkaisulla, ovatko
glukoosiarvot tavoitealueella,
liian matalalla tai korkealla. Värit
auttavat sinua tunnistamaan
ja reagoimaan muutoksiin
nopeammin ja tietoisesti.



DiaExpert CGM on hyväksytty diabetesta sairastaville, jotka ovat vähintään 2-vuotiaita. Hyväksyntä raskaana oleville on tulossa pian.

OIVALLUKSIA GLUKOOSIARVOISTA

Ymmärrä paremmin omaa hyvinvointiasi

DiaExpert-sensorijärjestelmä auttaa
sinua muuttamaan glukoosiarvot
hyödylliseksi tiedoksi, mikä tukee sinua
arjen päätöksenteossa.

- Näet glukoosiarvosi reaaliaikaisesti
– joka minuutti, ilman jatkuvaa
sormenpäämittausta¹.
- Voit seurata, miten ruoka, liikunta ja
lääkitys vaikuttavat verensokeriisi.
- Sovellus² ilmoittaa ajoissa, jos arvot
muuttuvat merkittävästi.
- Voit jakaa glukoosiarvot hoitohenkilökunnan
ja läheistesi kanssa, jotta voitte yhdessä
tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Helppokäyttöinen

DiaExpert-sensori on helppo asettaa olkavarteen mukana
tulevan asettimen avulla. Sensori on kooltaan **pieni ja kevyt**,
mikä tekee siitä **mukavan** käyttää. 60 minuutin lämpenemisajan
jälkeen sovellus näyttää glukoosiarvosi, **jotka päivittyvät
minuutin** välein. Sensoria voi käyttää **jopa 15 päivää**. Sovellus
myös kertoo, kuinka monta päivää sinulla on jäljellä.



Tukea tarvittaessa

Selkeän aloitusoppaan avulla yhdistät
sensorin mobiililaitteesi sovellukseen
tai vastaanotinlaitteeseen. **Sovellus on
helppokäyttöinen**. Älä huoli, jos kaikki ei
suju heti. Mediqin asiakaspalvelutiimi on
valmiina auttamaan sinua tarvittaessa
hyvillä vinkeillä ja neuvoilla.

¹Jos Sensorin lukemat eivät vastaa oireita, glukoosiarvo on vahvistettava sormenpäästä otetulla näytteellä.

²Yhteensopivien mobiililaitteiden luettelo löytyy osoitteesta diaexpert.com/downloads. Tai voit käyttää erikseen saatavilla olevaa DiaExpert-vastaanotinta.

OHJEET DIAEXPERT-GLUKOOSISENSORIN ASETTAMISEEN

Vaihe 1: Asenna DiaExpert-sovellus



Lataa DiaExpert CGM Google Playsta tai App Storesta.

Vaihe 2: Rekisteröi tili

Rekisteröidy DiaExpert CGM -sovellukseen käyttämällä henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ja salasanaa.

Yhteensopivien laitteiden luettelon löydät osoitteesta diaexpert.com/downloads. Voit halutessasi käyttää myös erikseen saatavilla olevaa DiaExpert-vastaanotinta.

Vaihe 3: Sensorin kiinnittäminen





1. Valitse asetuspaikaksi **olkavarren takaosa** (vältä olkavarren ulkosivun lihaksia).
2. **Puhdista asetuskohta** alkoholipyyhkeellä ja anna sen kuivua kokonaan ennen kiinnitystä.

3. Sensori sijaitsee applikaattorin sisällä. **Pidä applikaattori pystyasennossa** niin, että kansi osoittaa ylöspäin. Kierrä kansi auki ja **poista kosteudenpoistopalikka** ennen sensorin asettamista.

⚠ Huomio: **Varmista, että iho on täysin** kuiva puhdistuksen jälkeen. Sensorin asettaminen kostealle iholle voi heikentää kiinnittymistä tai aiheuttaa ihoärsytystä. Herkkäihoisille vesi ja saippua voivat olla alkoholia parempi vaihtoehto ihon puhdistamiseen.

4. **Aseta** applikaattori **valittuun kohtaan iholla** ja paina painiketta. Kun kuulet jousen vetäytyvän, sensoriosa asettuu ihon alle ja pistoneula vetäytyy automaattisesti takaisin applikaattoriin.

5. Nosta applikaattori **varovasti** pois iholta. Sensori on nyt kiinnitetty.
6. Tarkista, että sensori on asettunut kunnolla. **Tasoita sensorin reunat sormin**, jotta ne kiinnittyvät tukevasti. Vältä ryppyjä, sillä ne voivat aiheuttaa virheilmoituksia.

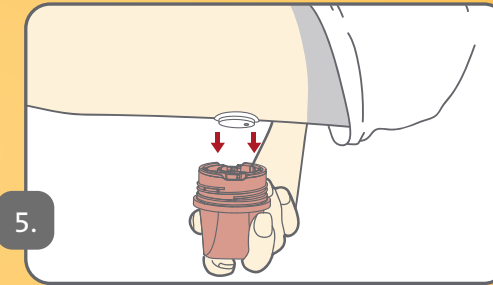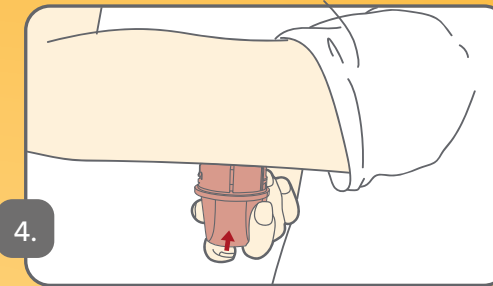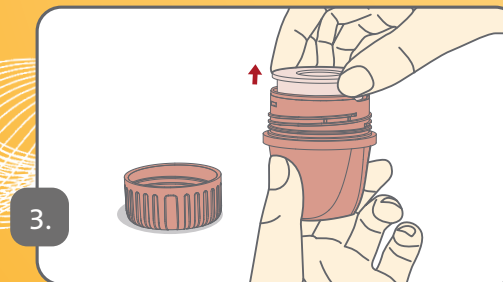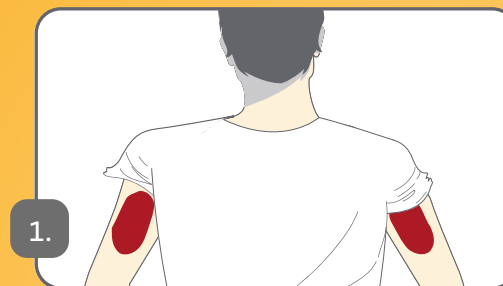

Vaihe 4: Yhdistä sensori DiaExpert-sovellukseen

1. Kirjaudu sisään DiaExpert-sovellukseen.
2. Varmista, että puhelimesi Bluetooth on päällä.
3. Napauta aloitusnäkyssä kohtaa ”Yhdistäminen”.
4. Valitse lähellä olevien laitteiden luettelosta oikea sensori **sen sarjanumeron** perusteella. Sarjanumero alkaa merkinnällä ”DiaXprt”. Varmista, että valitsemasi numero vastaa pakkauksen ja applikaattorin suojuksen sarjanumeroa.
5. Odota, että laitepari muodostuu onnistuneesti.

Valmiina aloittamaan!

Kun 60 minuutin lämmittelyaika on kulunut, sovellus alkaa näyttää glukoosiarvosi, jotka päivittyvät minuutin välein. Sensoria voi käyttää **jopa 15 päivän ajan**, ja sovellus kertoo, kuinka monta päivää käyttöaikaa on jäljellä.

Lisätietoja DiaExpert CGM -järjestelmän käytöstä löydät käyttöoppaasta latausosiossa osoitteessa diaexpert.com.


Onko vielä kysyttävää? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä Mediqin asiakaspalveluun – autamme mielellämme!

Tämä teksti löytyy myös osoitteesta diaexpert.com/getting-started

Haluatko mieluummin katsoa videon?

Olemme laatineet kaksi opastusvideota, jotka auttavat sinua hyödyntämään DiaExpert-glukoosisensorin ominaisuudet nopeasti ja helposti.

DiaExpert-glukoosisensorin käyttöönotto:

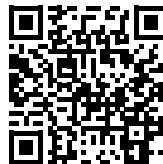

DiaExpert CGM -sovellus ja sen asetukset:



TUKI DIAEXPERT KÄYTTÄJILLE

Olemme tukenasi – Mediqin diabetes asiakaspalvelutiimi on valmiina auttamaan sinua.

Mitä Mediq tarjoaa DiaExpert-käyttäjille?



Käytännön tukea DiaExpert-glukoosisensorin ja sovelluksen käyttöön Mediqin asiakaspalvelutiimiltä.



Verkossa toteutettava aloitusohjelma, jossa jaetaan vinkkejä sensorin tehokkaaseen käyttöön.



Opastusvideot, joissa sensorin käyttö käydään läpi vaihe vaiheelta.



PIENI SENSORI, SUURI TUKI

Uuden DiaExpert-glukoosisensorin avulla Mediq tukee sinua diabeteksen hoidossa. DiaExpert-glukoosisensori on saatavilla vain Mediquestä. Mediq tarjoaa laajan valikoiman diabetestarvikkeita ja asiantuntemusta käyttöösi.

Kysyttävää?

Mediqn asiakaspalveluun saat yhteyden arkisin puhelimitse numerosta 020 112 1510 klo 8.00 - 16.00 tai asiakaspalvelu@mediq.com



Lisätietoa DiaExpert-sensorista löydät osoitteesta diaexpert.com. Sivustolta löydät myös opastusvideot.

Suosittelemme säilyttämään tämän oppaan tulevaa käyttöä varten.

Valmistaja Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0197.



DiaExpert

Markkinoija Suomessa:

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
puh. 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Myynti yksinoikeudella

