



Hillrom™



PST 500
Leikkauspöytä

LEIKKAUSSALISSA LEIKKAUSPÖYTÄ ON HOIDON PERUSTA.

Se on paikka, jossa kirurgit aloittavat potilaan ohjaamisen kohti toipumista. Se on paikka, johon hoitajat, teknikot ja asiantuntijat kokoontuvat taatakseen toimenpiteiden tasaisen kulun. Se on paikka, jossa potilaita tuetaan ja asemoidaan tämän kriittisen elämänhetken ajan.

Kaikkien näiden toimintojen keskipisteessä panokset ovat korkealla. Ja niin pitäisi olla myös standardien.

TUTUSTU HILLROMIN PST 500 -LEIKKAUSPÖYTÄÄN.

Tämä monipuolinen, helppokäyttöinen pöytä kestää toimenpiteiden määrät ja vaihtelevuuden, jotka kohtaat joka päivä, ja auttaa sinua tukemaan potilaitasi ja yhtenäistämään työnkulkua.

Oikeanlainen leikkauspöytä ei ole vain pöytä, vaan se on myös perusta, jolla hoito tapahtuu. Vahvalla perustalla mikä tahansa on mahdollista.






MONIPUOLINEN

Yksi pöytä tukee monenlaisia asentoja, joita tarvitaan erilaisiin kirurgisiin käyttötarkoituksiin. Näin se auttaa kasvattamaan investointisi arvoa ja laajentamaan toimenpidekapasiteettiasi.



TURVALLINEN

PST 500 -leikkauspöytä on 454 kg:n kantokykyä, törmäyksenvälvontänsä ja automaattisen korkeudensäädön lattialukitusjärjestelmänsä ansiosta turvallinen sekä potilaille että käyttäjille.*

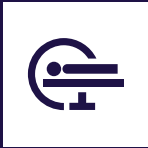

TEHOKAS

Modulaarinen rakenne, ergonominen käsittely, 360 asteen kuvaus ja merkkivalojärjestelmä auttavat sinua yhtenäistämään työnkulun ja kohtaamaan enemmän potilaita – nopeammin.†



INTUITIIVINEN

Pöydän asetukset ovat nopeita määrittää ja helppoja käyttää kevyiden komponenttien, automaattisesti kohdistuvan kytkentäjärjestelmän ja intuitiivisen kauko-ohjaimen ansiosta.

*Kantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan.

Lisätietoja on käyttöohjeessa.

†360 asteen kuvausominaisuus erityisten hiilikuitukomponenttien ansiosta.



YLEISKIRURGIA

**YKSI VAHVA PERUSTA.
USEITA ASETOJA.**

PST 500 tukee joustavasti monenlaisia kirurgisia toimenpiteitä, joita suoritetaan joka päivä. Määritä vain pöydän ja lisävarusteiden tarvittava kokoonpano, niin saat erinomaisen alustan jokaiselle toimenpiteelle.



BARIATRIA

Jaettu jalkaosa laparoskooppista mahalaukun toimenpidettä varten



KARDIOVASKULAARINEN

Selinmakuuasento kardiiovaskulaarisia toimenpiteitä varten, mukaan lukien C-kaaren käyttö



KILPIRAUHANEN

Selinmakuuasento kilpirauhaskirurgiaa varten



MUNUAINEN

Sivusuuntainen asento munuaisen poistoa tai rintakehän kirurgiaa varten



GYNEKOLOGIA/UROLOGIA

Litotomia-asento gynekologista tai urologista kirurgiaa varten




OFTALMOLOGIA / KORVA-, NENÄ- JA KURKKUALUE

Selinmakuuasento päätukijärjestelmällä oftalmologian ja korva-, nenä- ja kurkkualueen kirurgiaa varten

ORTOPEDIA

PST 500 -pöytä tarjoaa mahdollisuuden käyttää samaa pöytää sekä yleiskirurgiaan että moniin ortopedisiin toimenpiteisiin.

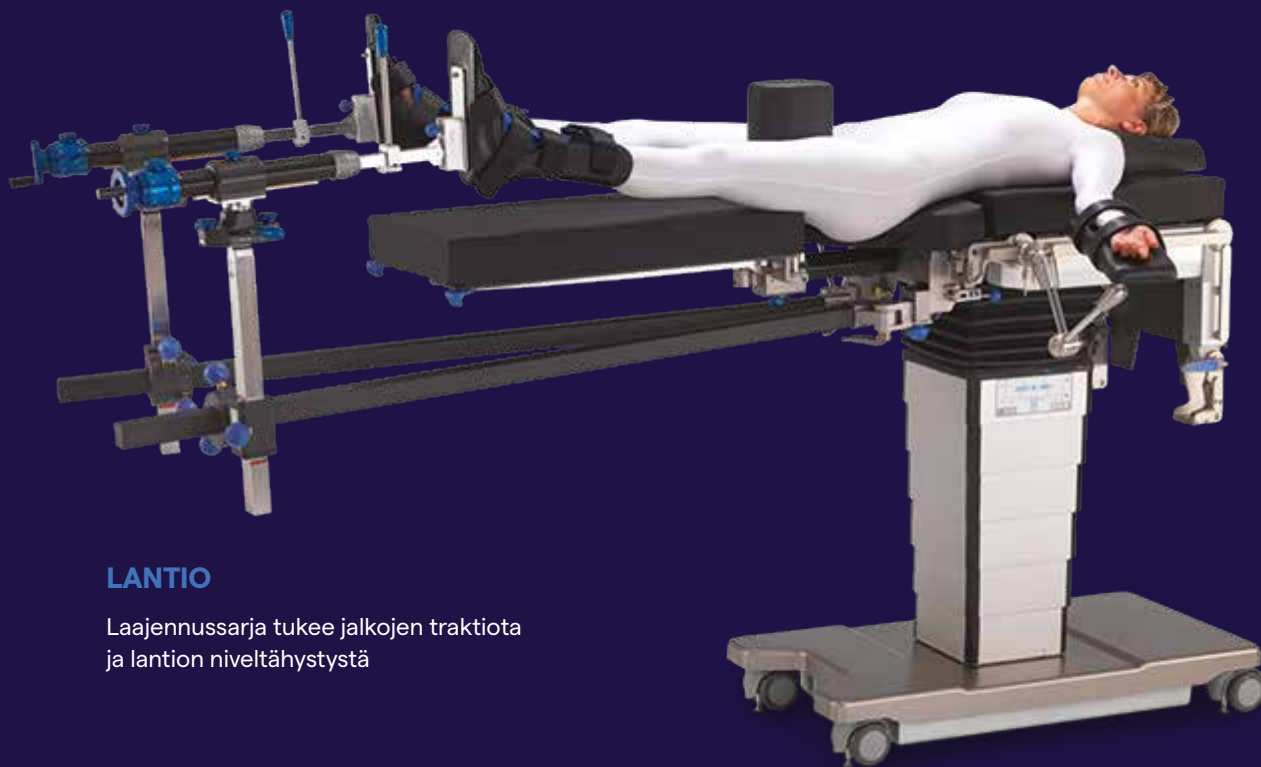

LANTIO

Laajennussarja tukee jalkojen traktiota ja lantion niveltähystystä



OLKAPÄÄ

Rantatuoliasento niveltähystystä ja olkapään avokirurgian toimenpiteitä varten



KÄSI

Liitettävä laajennuskappale kädelle yläraajan paikallaan pitämistä ja tukemista varten



REISI JA LANTIO

Mini-invasiivinen (MIS) lantion artroplastia



POLVI

Esteetön pääsy artroskopiaa varten

SELKÄRANKA- JA NEUROKIRURGIA

Erityisiä, yhden toiminnon pöytiä ei tarvita. Selkäranka- ja neurokirurgian toimenpiteet voidaan suorittaa PST 500 -leikkauspöydällä sen joustavan kokoonpanon ja lisävarusteiden ansiosta.



SELKÄRANKA

Selkärankakirurgia korkealla C-kaarella

360 asteen

kuvaus tehty helpoksi*

Pöydän röntgensäteilyä läpäisevä pöytälevy ja hiilikuitulaitteet tekevät 360 asteen kuvauksesta helppoa. Lisäksi voit asemoida C-kaaren tarvitsemaasi asentoon kätevän pitkittäissuuntaisen liukualueen ansiosta.



*360 asteen kuvauskyky erityisten hiilikuitukomponenttien ansiosta.



NEUROKIRURGIA

Neurokirurgia istuma-asennossa auttaa posteriorisessa kallokirurgiassa



360 ASTEEN NEUROKIRURGIA

Joustava pään aseointi kolminivelisellä sovittimella 3D-neurokirurgiaa varten

INTUITIIVINEN MUOTOILU

Olemme suunnitelleet PST 500 -leikkauspöydän helppokäyttöiseksi, jotta kirurginen tiimisi voi keskittyä siihen, mikä on tärkeintä – edessään olevaan potilaaseen.

Nopea käyttöönotto

Pöydän kevyiden komponenttien ja automaattisesti kohdistuvan kytkentäjärjestelmän ansiosta käyttöönotto ja muutosten tekeminen on nopeaa ja helppoa.

Tasaiset pinnat

Sileät pinnat helpottavat puhdistamista.

Monipuolinen pöytälevy

Laajan kallistusalueen ansiosta oikea asento on aina saavutettavissa.

Innovatiivinen merkkivalojärjestelmä

Värikoodatut LED-valot kertovat pöydän tiloista, kuten jarruasetuksista, akun lataustasosta ja virhetilasta vähentäen hälytysten aiheuttamaa hoitohenkilökunnan uupumista.



*360 asteen kuvauskyky erityisten hiilikuitukomponenttien ansiosta.

†Kuormankantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

§Pöytää tulisi käyttää ensisijaisesti kauko-ohjaimella. Kauko-ohjain myydään erikseen.

Kuvauksen tuki

Pöytälevyn lähes 40 cm:n liukuman ansiosta C-kaaren käyttö on helppoa, ja hiilikuitukomponentit mahdollistavat 360 asteen kuvauksen.*

Törmäyksen valvonta

Vältä törmäykset ja niihin liittyvät riskit.

Intuitiivinen muotoilu

Kaikki käyttöelementit on värikoodattu, minkä ansiosta käyttö on nopeaa ja helppoa.

Potilaan painon suuri kantokyky


Pöydän kantokyky on jopa 454 kg, joten sitä voidaan käyttää monenlaisille potilaille.†

Helppo siirtää

Kaksoispyörät ja viides vakiopyörä auttavat sinua siirtämään pöytää sinne, missä tarvitset sitä.

Intuitiivinen langallinen tai langaton kauko-ohjain[§]

Taustavalaistua kauko-ohjainta on helppo käyttää heikosti valaistuissa ympäristöissä. Kauko-ohjain on saatavissa langallisena tai langattomana mallina. Sen kuvakkeet, värit ja symbolit vastaavat ohjauspylvään merkintöjä, jolloin käyttö on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

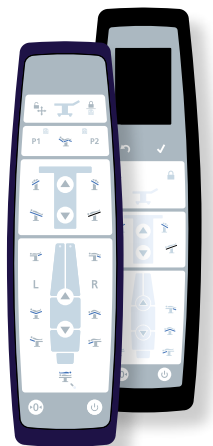


TEKNISET TIEDOT

PST 500 perustuu Hillromin vahvaan kokemukseen kirurgiasta ja korkealaatuisesta suunnittelusta – hinnalla, joka ei horjuta budjettiasi. Se on suunniteltu tosielämän kirurgisiin ympäristöihin – myös sellaiseen kuin sinun.

PST 500 -leikkauspöytä	
Pöytätaason mitat	P 107 cm x L 60 cm
Pöydän nettopaino	250 kg
Korkeudensäätö	59,8 cm – 114,8 cm ± 0,5 cm
Trendelenburg / käänteinen Trendelenburg	± 35° (± 2°)
Kallistaminen	± 25° (± 2°)
Pitkittäisliuku	40 cm ± 0,5 cm pääpuoli: 20 cm / jalkopää: 20 cm
Yhtenäisen selkäosan säätöalue	± 90° (± 2°)
Yhtenäisen jalkaosan säätöalue	+90° / -105°
Nolla-asetointi	Pöytälevyn osien samanaikainen automaattinen korkeudensäätö
Maksimikokonaiskuorma	454 kg*



*Kantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

KORKEUDENSÄÄTÖ

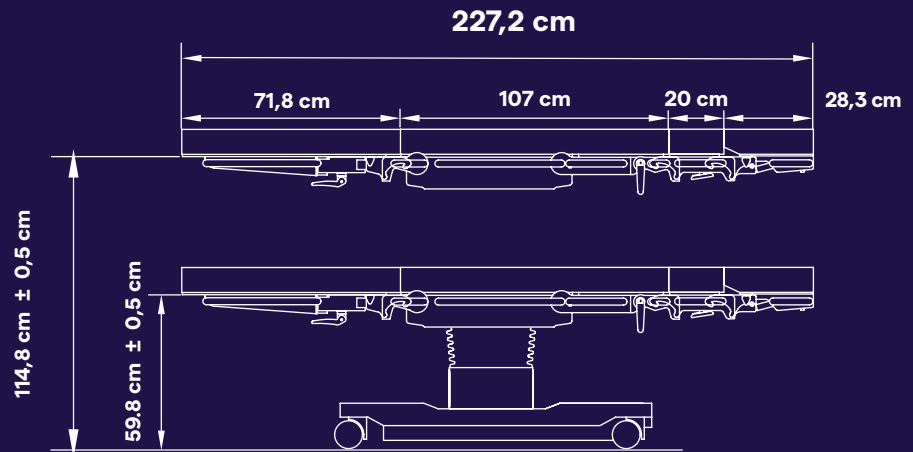


TRENDELENBURG / KÄÄNTEINEN TRENDELENBURG


KALLISTAMINEN

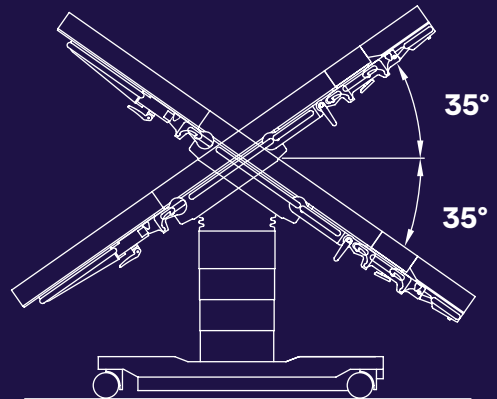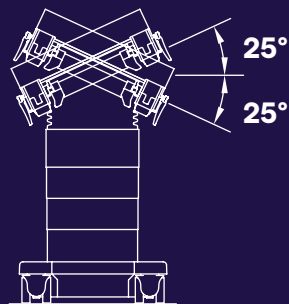


JALKAOSAN SÄÄTÖ

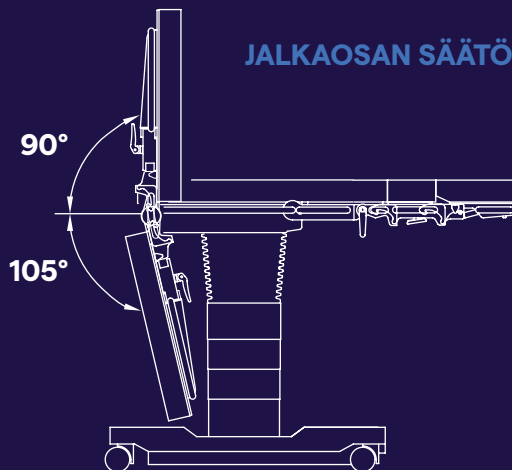

SELKÄOSAN SÄÄTÖ

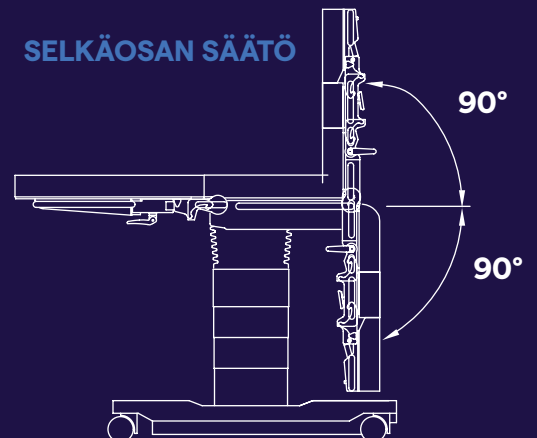

PITKITTÄISLIUKU

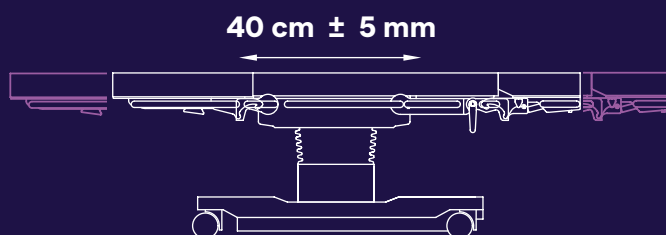

ASIAANTUNTIJAHUOLTO. VALMIINA, KUN TARVITSET MEITÄ.

PST 500 antaa sinun osoittaa mahdolliset ongelmat ja maksimoida näin laitteen käyttöajan.


- Helppo pääsy pylvääseen ja jalustaan
- Integroitu intuitiivinen virhediagnoosin näyttöjärjestelmä
- Kauko-ohjain näyttää automaattisia huoltomuistutuksia
- Merkkivalojärjestelmä ilmaisee huollon tarpeen



Perusta, jonka sinä ja potilaasi ansaitsette



**MONENLAISIA
KIRURGISIA
KÄYTTÖTARKOITUKSIA**
ja laaja valikoima asentoja

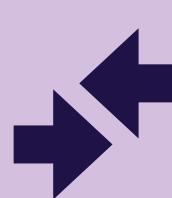

50+
YHTEENSOPIVAA
LISÄVARUSTETTA




**INNOVATIIVINEN
MERKKIVALO-
JÄRJESTELMÄ**



**TÖRMÄYKSEN
VALVONTA**

Vakiosivukaiteet, joihin sopivat

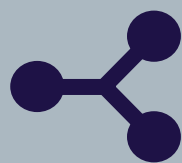

**3. osapuolen
lisävarusteet**

*Kantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

†360 asteen kuvauskyky erityisten hiilikuitukomponenttien ansiosta.



Hillrom™

TIETOJA HILLROMISTA

Hillrom on maailmanlaajuisesti toimiva lääkinällisen teknologian johtava toimittaja, jonka 10 000 työntekijällä on yhteinen päämäärä: lopputulosten parantaminen sekä potilaiden että hoitajien kannalta kehittämällä verkkohoitoa. Innovaatiomme vaikuttavat päivittäin yli 7 miljoonaan potilaaseen ympäri maailmaa. Ne auttavat tekemään diagnooseja ja antamaan hoitoa aikaisin, parantavat leikkaushoidon tehokkuutta ja nopeuttavat potilaiden toipumista yksinkertaistamalla hoitoon liittyvää tiedonsiirtoa ja siirtämällä hoitoa lähemmäksi kotia. Nämä tulokset ovat mahdollisia verkkoon yhdistettyjen älyvuoteiden, potilasnostinten, potilasarviointi- ja -valvontateknologioiden sekä hoitajien yhteistyövälineiden, hengityshoitolaitteiden, edistyneen leikkaussalilaitteiston ja monien muiden ratkaisujen ansiosta, joista saadaan käytäntöön sovellettavia, reaaliaikaisia tietoja potilaspaikalla. Lisätietoja on osoitteessa hillrom.com.

Paras leikkaushoito alkaa turvallisuuden ja tuen vahvalla perustalla. Lisätietoja PST 500 -pöydästä on osoitteessa hillrom.com.

130 E. Randolph St. Suite 1000, Chicago, IL 60601

PST 500 on tarkoitettu lääkäreiden ja pätevän hoitohenkilökunnan käyttöön. Tämä lääkinällinen laite on säädösten alainen terveydenhoitotuote, jossa on säädöstenmukaisuuden osoituksena CE-merkintä. Hill-Rom kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti lääkinällisten laitteiden mukana toimitetut ohjeet, joissa on neuvottu turvallinen ja asianmukainen käyttö. Terveydenhuoltolaitosten henkilöstö on vastuussa lääkinällisten laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta. Hill-Rom pidättää oikeuden muuttaa muotoilua, teknisiä ominaisuuksia ja malleja ilman erillistä ilmoitusta. Ainoa Hill-Romin myöntämä takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myönnetty nimenomainen kirjallinen takuu. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG on Hill-Rom Holdings, Inc:n tytäryhtiö.