



Lactate SCOUT 4 Starter Set

ALOITUSPAKKAUS LAKTAATIN MITTAAMISEEN!




Kun urheiluharjoittelu tehostuu, elimistö tuottaa enemmän laktaattia ja samalla elimistön kyky poistaa laktaattia kasvaa. Laktaatin määrän mittaamista harjoittelun aikana ja sen seuraamista Assistant-ohjelmiston avulla voidaan hyödyntää tehokkaamman harjoittelutason aikaansaamiseksi. Paras aerobinen harjoittelutaso saavutetaan, kun laktaatin tuotto ja hajotus ovat elimistössä optimitasolla, noin 4 mmol/l.

Lactate SCOUT 4 starter set

Sisältää

- Lactate SCOUT 4 -mittarin
- Assistant-ohjelmiston
- kantolaukun
- puhdistussuihkeen.

Tuotenumero 1703585

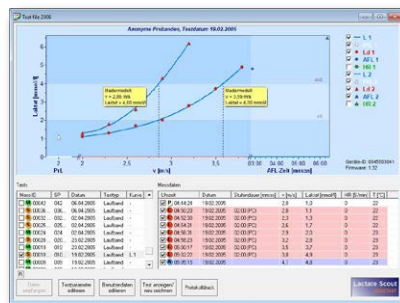

KAMPANJA-
HINTA

399 €

sis. alv. 24 % (321,77 € alv. 0 %)

Tarjoushinta
voimassa 8.7.2022 asti.

Lisätarvikkeet ostettavissa erikseen:

TESTILIUSKAT 72 KPL

- tuotenumero 25888
- hinta 200,50 €, sis. alv. 24 %
(161,71 € alv. 0 %)

LACTATE SCOUT KONTROLLI

- tuotenumero 1025883
- hinta 74,10 €, sis. alv. 24 %
(59,74 € alv. 0 %)

LANSETIT 200 KPL

PROLANCE HIGH FLOW 18G 1,8 MM

- tuotenumero 1230997
- hinta 31 €, sis. alv. 24 %
(25 €, alv. 0%)

TULOS 10 SEKUNNISSA

Lactate SCOUT 4 -pikamittarilla mittaat veren laktaattipitoisuuden tipasta kapillaariverta (0,2 ul), jonka saat helposti esimerkiksi sormenpästä lansetin avulla. Mittarissa on iso näyttö ja helppokäyttöinen rullaohjain ja mittarin muistiin mahtuu 500 mittaustulosta.

Lactate SCOUT 4 -mittari huomioi mittauksessa myös lämpötilan, joten laitetta voidaan kuljettaa harjoittelussa mukana. Assistant-ohjelman avulla voit luoda oman optimaalisimman harjoitteluohjelmasi helposti!

HELPPO KÄYTTÄÄ

- Ota testiliuska liuskapakkauksesta.
- Aseta liuska laitteeseen.
- Viritä lansetti pistovalmiiksi.
- Puhdista, desinfioi ja kuivaa sormenpää tai korvanlehti.
- Pistä puhdistettua kohtaa ja pyyhi ensimmäinen veripisara pois. Ota näyte toisesta pisarasta (älä purista).
- Vie Lactate Scout 4 -mittari lähelle veritippaa. Vältä ihon koskettamista testiliuskalla. Anna tarvittavan määrän verta imeytyä liuskaan.
- Tulos ilmestyy näytölle 10 sekunnin kuluessa.

TEKNISET TIEDOT

Laite	Lactate SCOUT 4
Valmistaja	EKF Diagnostics
Mittaustapa	Entsyaattis-amperometrinen laktaatin mittaus kapillaariverestä
Mittausalue	0,5–25,0 mmol/l
Näytetilavuus	0,2 µl
Mittausaika	10 sekuntia
Mittauksen CV %	3–4 % riippuen hematokriitistä
Mittauslämpötila	+5 – + 45 °C
Ilmankosteus	alle 85 % suhteellinen kosteus
Muisti	500 näytteelle
Mitat	91 x 46 x 21 mm
Paino	60 g pattereilla
Näyttö	LCD-näyttö
Virtalähde	2 x 1,5 paristo AAA/LR03
Liitännät	Sarjaportti 2,5” liitännällä Bluetooth-liitäntä



TOIMITUSEHDOT:

www.mediq.fi/palvelut/asiakaspalvelu/toimitusehdot

Toimitamme tilaukset henkilöasiakkaille (asiakkaat, joilla ei ole Mediqin asiakasnumeroa) postiennakolla.

Katso lisätietoja: www.mediq.fi/lactatescout tai www.ekfdiagnostics.com/lactate-scout

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

